
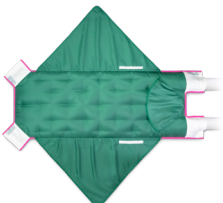
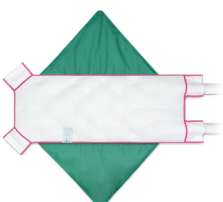


CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR LE HAUT + PAR LE BAS	Face supérieure		Description	Matelas thermique avec ailes latérales et capuche pour le contrôle de la température par le haut et par le bas
	Face inférieure		N° type	902
			N° d'article	11WD902M
			Dimensions ¹	130×52 cm (L×L) / Aile 96×49 cm (L×L)
			Poids	Environ 890 g
			Matériaux	Tissu vert et rembourrage : 100 % polyester / Tissu blanc : 100 % polyester avec enduction polyuréthane
			Raccords de tuyaux	● ● ● ●
			Spécifications techniques	► Placement sous le patient ► Accès complet et sans restriction au patient ► La couche intégrée réduit la pression de contact et minimise l'accumulation de liquide en surface ► Avec recouvrement de la tête et du corps

Exemples d'utilisation ²

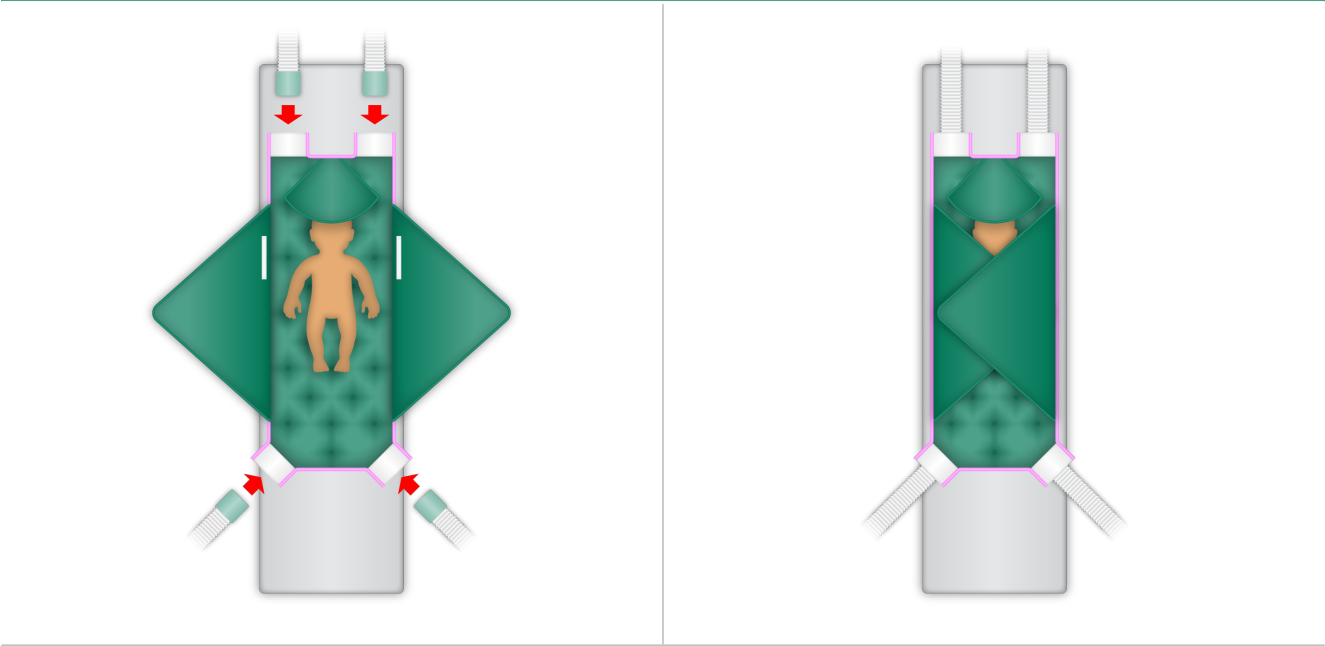

Instructions d'utilisation ³

									
Préopératoire	Peropératoire	Postopératoire	Positionnement sur le dos	Positionnement sur le ventre	Positionnement sur le côté	Lithotomie	Beachchair	Changement de lit	Pédiatrie

Chirurgie générale	✓	Neurochirurgie	✓
Chirurgie vasculaire	✓	Chirurgie orthopédique et traumatologique	✓
Gynécologie et obstétrique		Pédiatrie	✓
Chirurgie cardiaque	✓	Chirurgie esthétique	✓
Chirurgie de la tête	✓	Chirurgie viscérale	✓
Chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale	✓	Chirurgie thoracique	✓

CE ¹ Les produits textiles rétrécissent de 3 à 5 % lors des premiers cycles de traitement. Par ailleurs, les dimensions sont basées sur une valeur de tolérance de ± 2 cm.
² Les exemples d'application illustrent toutes les options de raccordement disponibles – un à deux flexibles maximum suffisent pour une mise en service correcte.
³ Les indications d'utilisation sont fondées sur l'expérience pratique de nos partenaires de service et sont fournies à titre indicatif.

© 2026 MOECK & MOECK GmbH · Waidmannstr. 12 · 22769 Hamburg · Allemagne · MOECKWARMINGSYSTEM.DE

WD53902 Rév.01 du 06-2026